

OpenDolphin 評価版プログラムご利用の流れ

評価版の利用登録

1. 当社ホームページ内、「OpenDolphin 体験版はこちら」のバナーをクリックします。



2. 体験版ソフトダウンロードから希望の OS 名をクリックします。
(Windows 版で説明致します。Java8 を事前にインストール願います。)


The image shows a two-part process. The top part is a screenshot of a web browser displaying the LSC OpenDolphinPro download page. The page has a blue header with the LSC logo and navigation tabs. A sidebar on the left lists various products. The main content area features a large banner for 'OpenDolphin クラウド' and a section titled '体験版ソフトダウンロード' (Download Trial Software). Under this section, there are two radio buttons: 'Windows版' (Windows version) and 'Mac版' (Mac version). The 'Windows版' button is highlighted with a red box. Below the buttons, there are instructions for installation and a list of steps. A large red arrow points from the 'Windows版' button down to the bottom part of the image.

The bottom part of the image shows a Windows file explorer window. A context menu is open over a file named 'launchjnp'. The menu options are: '開く(O)' (Open), 'この種類のファイルは常に開く(A)' (Always open this type of file), 'フォルダを開く(S)' (Open folder), and 'キャンセル(C)' (Cancel). The '開く(O)' option is highlighted with a red box.


3. ファイルを開くと、下記の画面が開きます。
チェックボックスに**チェックを入れて**実行を押します。




4. ログイン画面が開きますので、[設定]ボタンをクリックします。

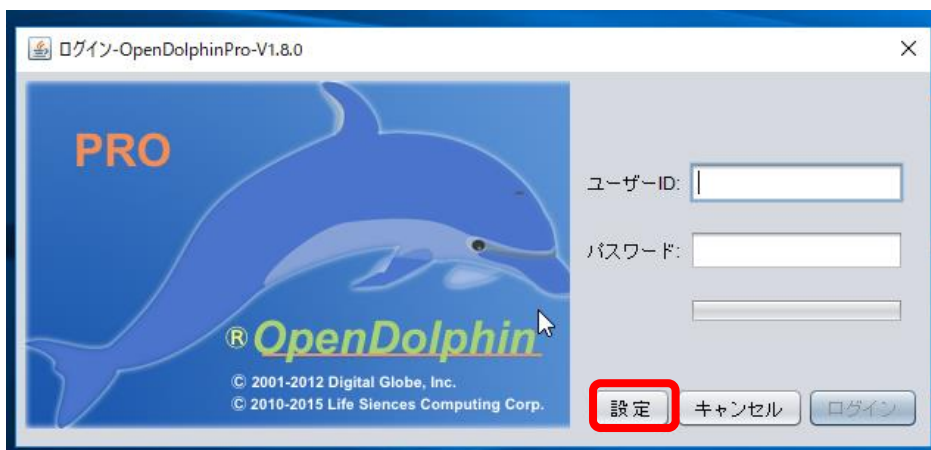

5. 新規にアカウントを作成します。
([評価用アカウント作成...]ボタンをクリックします。)

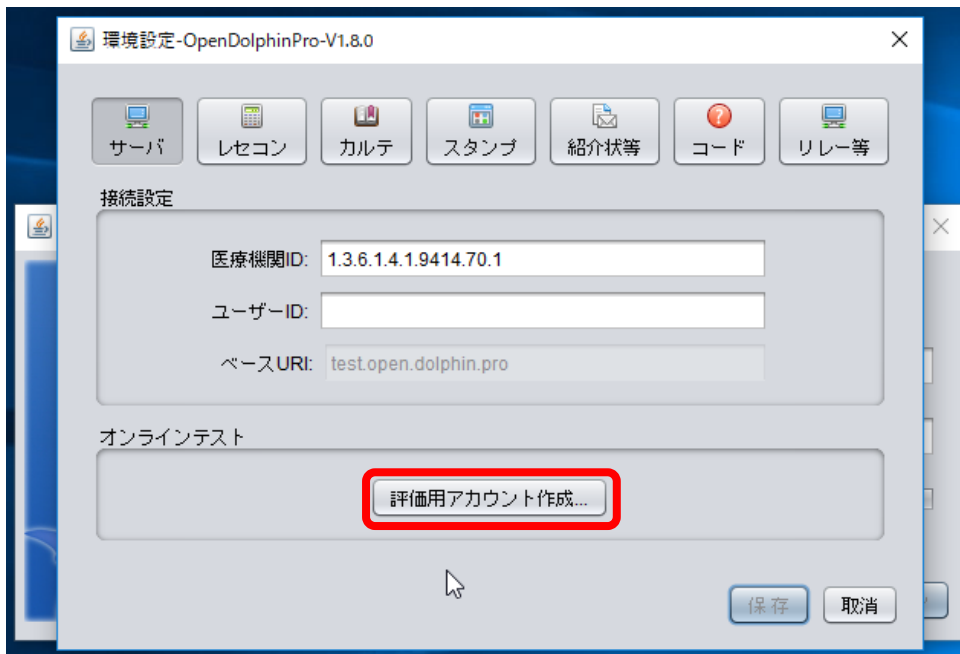


6. アカウント作成についての説明をご確認頂き、[通信テスト]ボタンを押します。

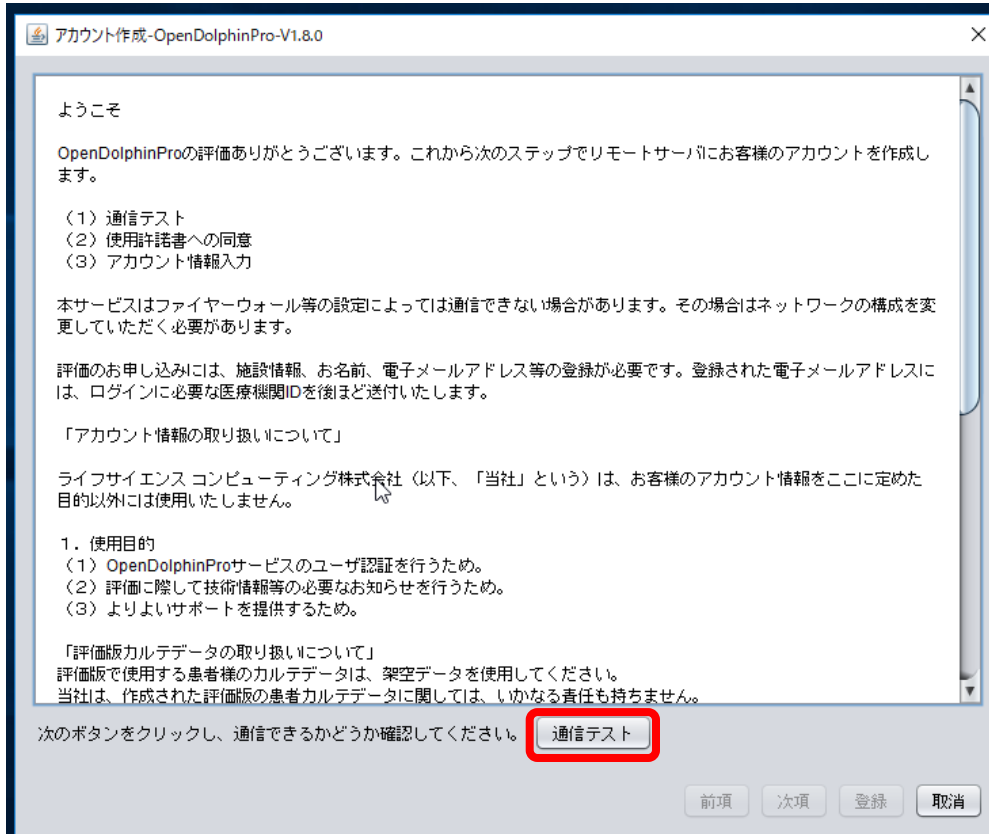


[通信テスト]が失敗する場合は、ネットワークの管理者様にお問い合わせください。
環境により通信ができない場合は、アカウントが発行できません。


7. 通信テストに成功しますと下記画面が出ます。[OK]を押し、9に進みます。

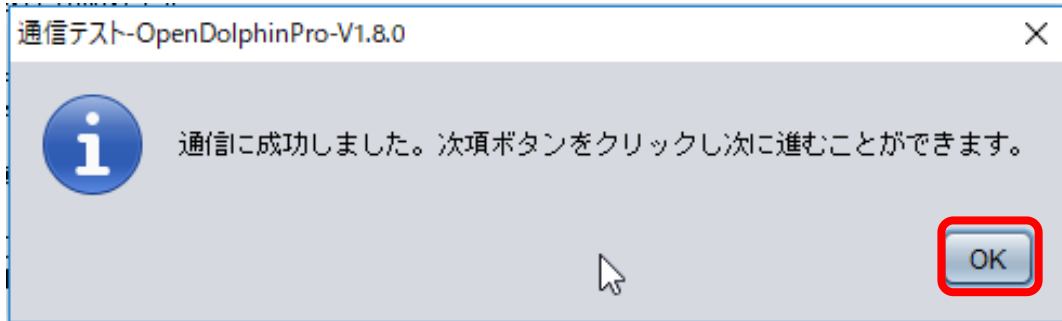

8. 通信テストに失敗しますと下記画面が出ます。[OK]を押し、再度通信状況を確認し、通信テストを行います。(何度もこのメッセージが出る場合は、ネットワーク状況の確認をして下さい。)

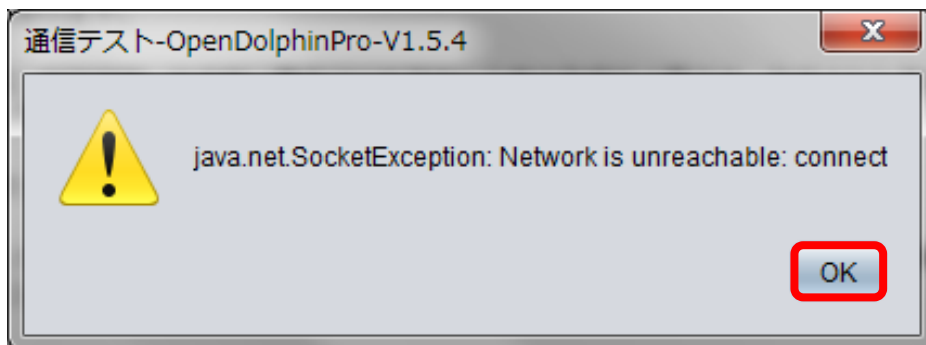

9. [次項]を押し次に進みます。

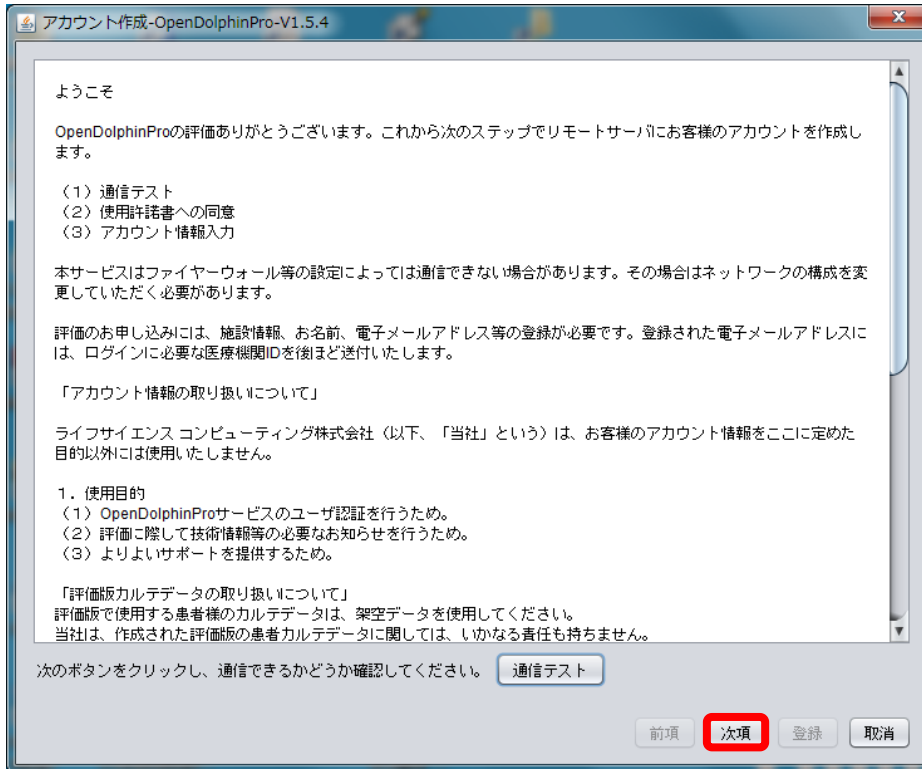

10. 使用許諾をお読み頂き、[同意する]のボタン→[次項]を押し、11.に進みます。

アカウント作成-OpenDolphinPro-V1.8.0

OpenDolphinPro 評価版使用許諾書

ライフサイエンス コンピューティング株式会社（以下「当社」という）は、OpenDolphinProを評価していただき、導入のご検討をさせていただくために評価版の提供を行います。本製品の評価をご検討の医療機関および医療従事者（以下「お客様」という）は、ご利用の前にこの使用許諾書（以下「本契約」という）をお読みください。医療機関登録をされると本契約に同意されたものとみなします。

「禁止事項」
お客様は、評価期間中は、このサービスで以下のことを行うことはできません。
(1) OpenDolphinProの導入評価以外の目的でこの評価版を使用すること。
(2) カルテデータに、実存患者様カルテデータを使用すること。（必ず架空データを使用してください。）
(3) アカウントを第三者に与えること。

「サポート」
評価版に対する保守・保証は一切提供されません。
不具合および改善等の問合せは、下記連絡先e-mailにお送りください。
製品開発の参考にさせていただきます。

「免責」
当社は、評価版または本契約における当社の履行を原因としてお客様、お客様の患者様または第三者が被ったいかなる損失や損害について一切責任を負わないものとします。また、当社は本契約の履行から生じた直接的、間接的、特別損害、付随的損害または派生的損害については、その根拠が債務不履行、不法行為または他の法理論にあるか否かを問わず、責任を負いません。

「使用期限」

同意する 同意しない

前項 次項 登録 取消

11. 空欄に必要事項を入力します。すべて埋めると登録ボタンが出ますので押します。

管理者ログイン ID : 決められた文字数内で決定してください。

※他で使用されている ID は利用できません

必ず手元に書き留めてください。

パスワード : 半角英数記号を使用して設定してください

※記号必須、ハイフン使用不可

必ず手元に書き留めてください。


医療資格 : 評価の際は必ず「医師」を選んでください。

※医師以外を選択した場合、カルテの作成が出来ません。

メールアドレス : 必ず受信できるメールアドレスをご使用ください。

ログインに必要な情報が登録アドレス宛に送信されます。

12. 下記のメッセージが出ましたら、メールをご確認ください。[OK]を押します。

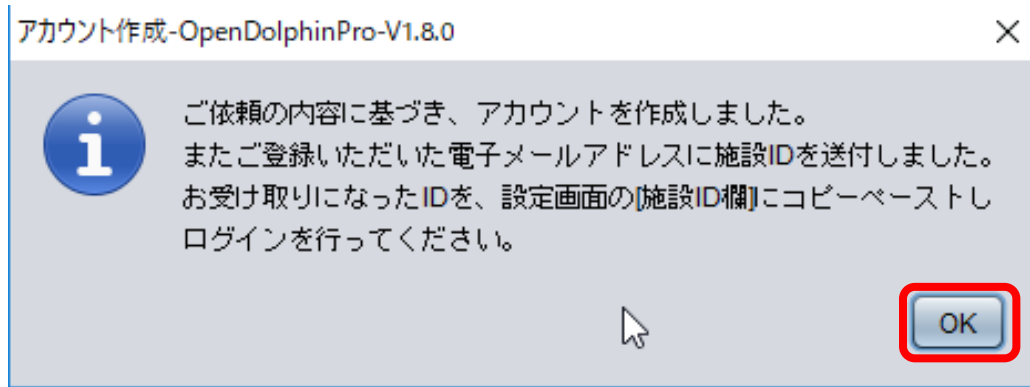

13. 自動送信されたメールの例です、赤枠の部分は大変重要です。

メールが送られて来ない場合は、再度登録をお願いします。(登録アドレスが正しくない可能性がございます)

From: dolphin@lsc.co.jp
Sent: Thursday, August 23, 2018 4:29 PM
To: XXXXXXXXXXX@XXX.XXX.jp
Subject: OpenDolphinアカウント作成のお知らせ

このメールは、電子カルテOpenDolphinの評価をお申し込みの方に自動転送しています。もしお心あたりの無い方は、おそれいりますが至急ご連絡をお願いいたします。

お申し込みいただいた内容に基づき、次のアカウントを作成しました。

施設名: ライフサイエンス診療所
医療機関ID: 1.3.6.1.4.1.9414.71.1351
ご住所: 171-0022 東京都豊島区南池袋2-30-12
電話番号: 03-5911-1455
お名前: 来普 一郎

ご利用にあたり、上記の医療機関IDをOpenDolphinの「サーバ設定画面・医療機関ID欄」にコピーペーストし、ログインしてください。数字の前後や途中に空白は含まれません。正確にコピー・ペーストをお願いいたします。

またこのIDは、同じ施設内で別の方のアカウントを作成する時等に必要です。紛失されないように管理をお願いいたします。お申し込みありがとうございました。

「アカウント情報の取り扱いについて」

ライフ・サイエンス・コンピューティング（株）は、お客様のアカウント情報を次の目的のみに使用いたします。

利用目的

- (1) OpenDolphin クラウドサービスのユーザ認証を行うため。
- (2) バージョンアップ等、サービスを提供するうえで必要なお知らせを行うため。
- (3) よりよいサポートを提供するため。

ライフ・サイエンス・コンピューティング（株）
171-0022 東京都豊島区南池袋2-30-12富士火災池袋ビル7F
電話 03-5911-1455 FAX 03-5911-1456

このメールが届きますと、登録は完了です。

評価版 OpenDolphin にログイン


1. 13.のメール内の数字をコピーし、医療機関 ID に貼り付けます。
また、登録したユーザーID を確認し、[保存]ボタンを押します。



2. 登録したユーザーID、パスワードを入力し、ログインを押します。




3. ログインに成功すると、受付リストが表示されます。

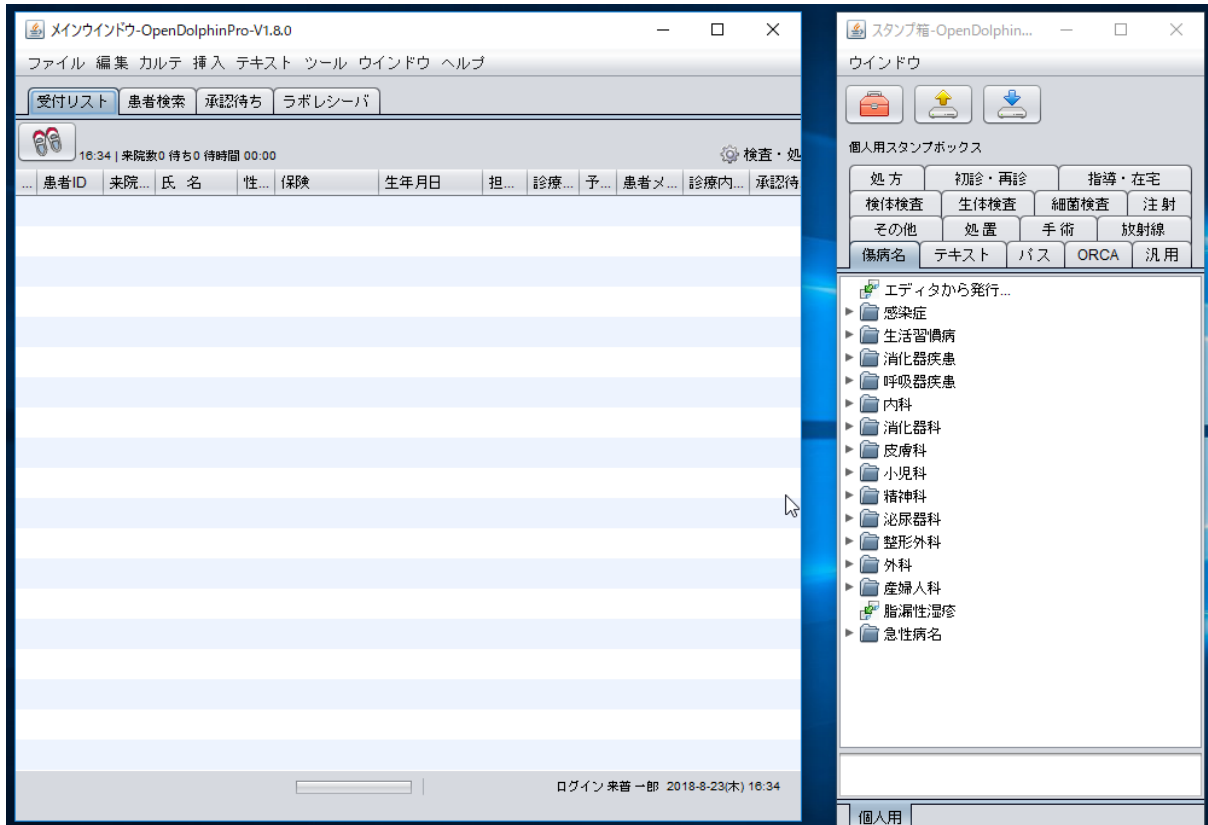

テスト患者のカルテを開く


1. [患者検索]タブを押し、検索窓に D と入力、Enter を押します。

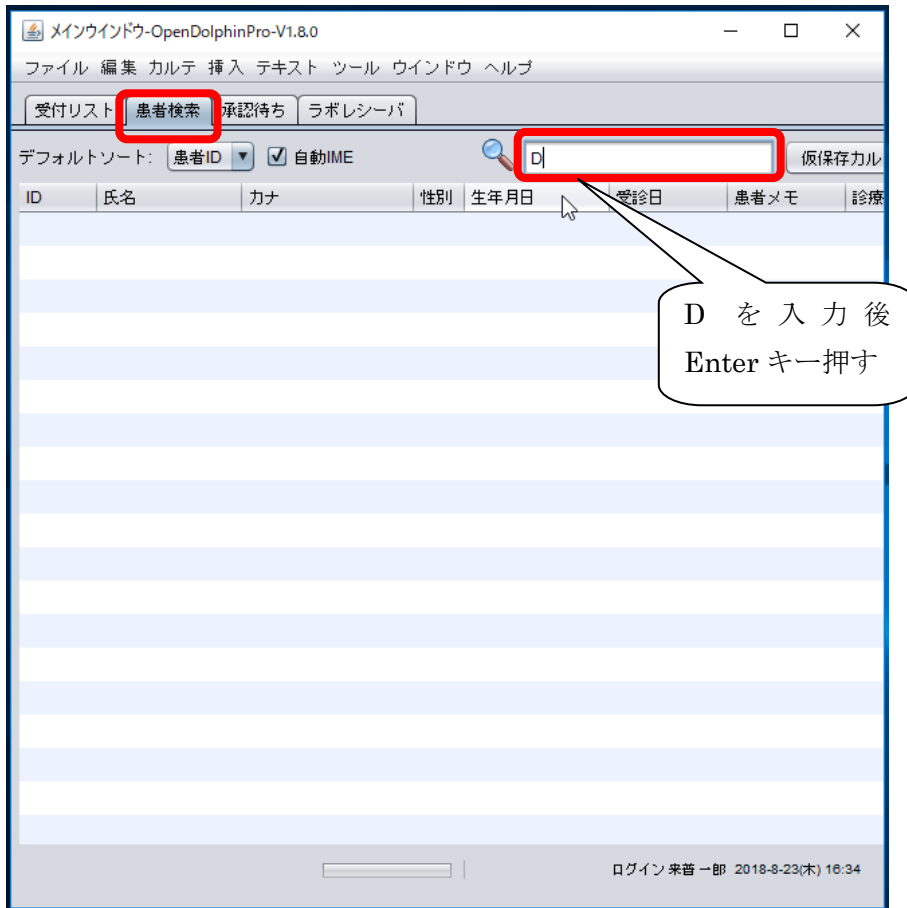

2. 5人分のカルテが登録されています。テスト太郎さんをダブルクリックしてみます。

ID	氏名	カナ	性別	生年月日	受診日	患者メモ	診療
D_000001	テスト太郎	テスト タロウ	男	38歳 (1980-02-05)			
D_000003	佐藤 一朗	サトウ イチロウ	男	63歳 (1954-10-10)			
D_00001	テスト 患者1	テスト カンジャ1	女	38歳 (1980-06-14)			
D_00002	テスト 患者2	テスト カンジャ2	男	30歳 (1988-01-01)			
D_00003	池袋 一	イケブクロ ハジメ	男	38歳 (1980-05-05)			

3. 別ウインドウで、テスト太郎さんのカルテが開きました。

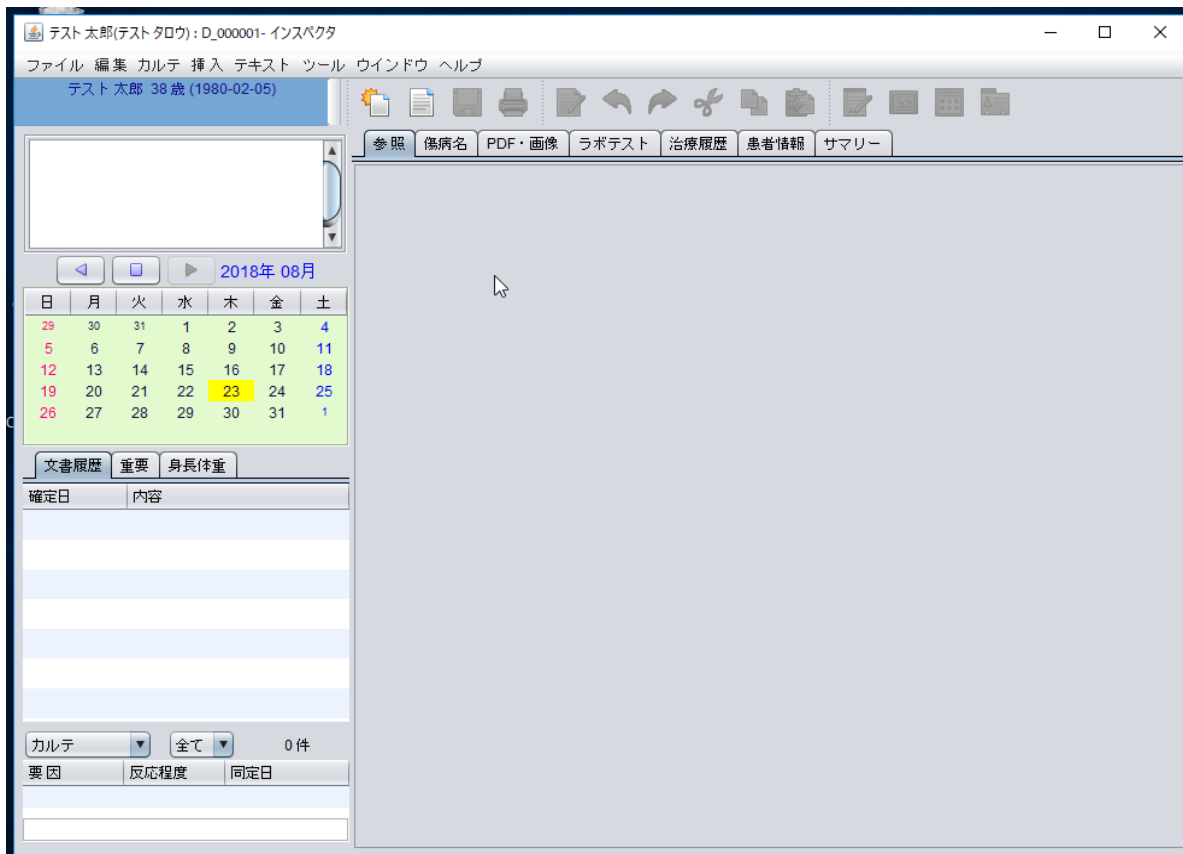

カルテ作成等の操作は、評価版ダウンロードサイト内にご
ざいます、「OpenDolphinPro 操作説明書」をご参照
下さい。

2018年8月24日
ライフサイエンスコンピューティング株式会社
サポート部 作成